

Инструкция активации приложения RUMEDIUS

2025-02-26

[Установка приложения RUMEDIUS на iOS, macOS](#)

[Активация версии приложения RUMEDIUS для iOS, macOS через портал portal.dimedus.com](#)

[Установка на ПК под управлением Windows](#)

[Установка на смартфон или планшет под управлением Android](#)

[Активация лицензионного ключа на устройствах под управлением Android или Windows](#)

[Установка на шлем виртуальной реальности Quest](#)

[Активация лицензионного ключа на шлеме виртуальной реальности Quest](#)


Установка приложения RUMEDIUS на iOS, macOS

Ссылка на Руководство по установке:

[Руководство по установке](#)


Активация версии приложения RUMEDIUS для iOS, macOS через портал portal.dimedus.com

1. После установки и запуска приложения откроется виртуальный планшет, если в списке сценариев их около пятнадцати, это значит, что вы подключены в деморежиме.


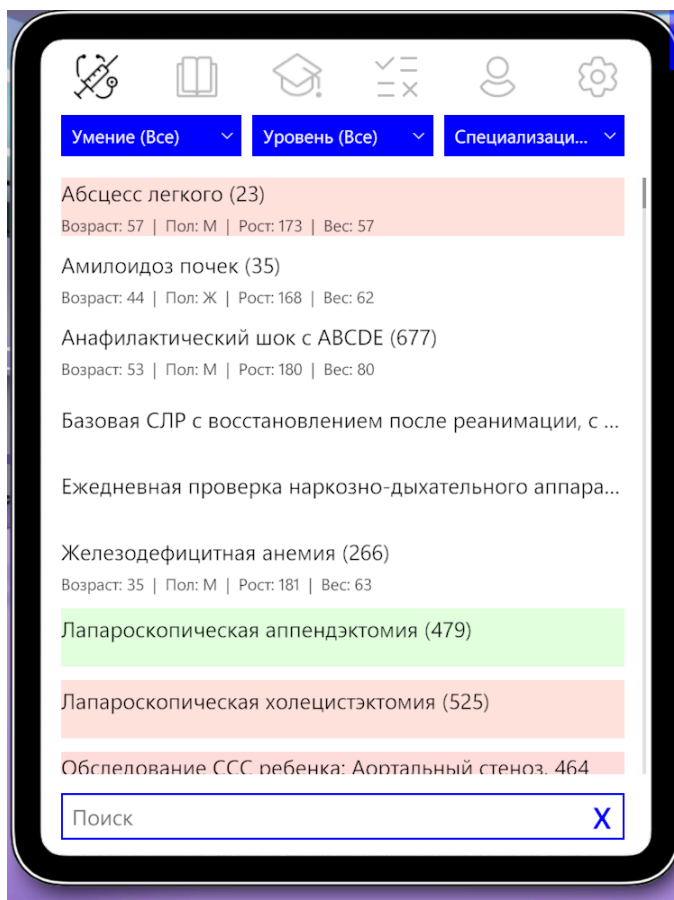


Для доступа к полному перечню сценариев необходимо активировать устройство.

2. Для активации необходимо в виртуальном планшете перейти во вкладку настроек, тапнув (быстро коснувшись пальцем) на значок шестеренки в правом верхнем углу планшета

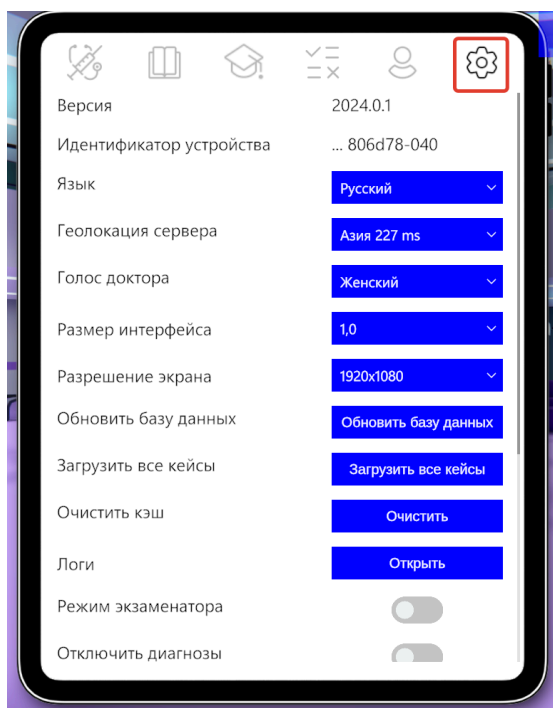

3. После открытия меню настроек необходимо тапнуть по надписям Версия или Идентификатор устройства, при этом внизу должно появиться сообщение "Идентификатор скопирован в буфер обмена"

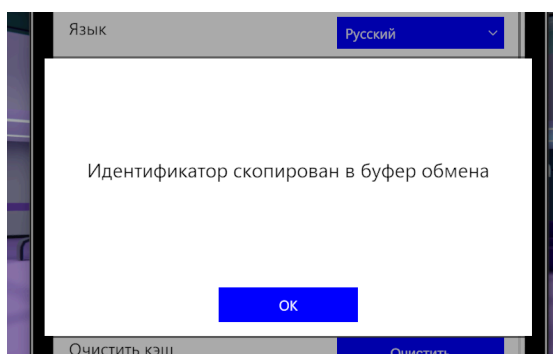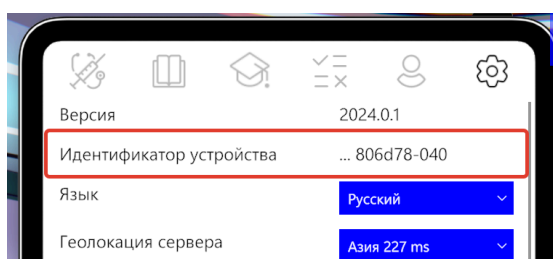

- После этого необходимо свернуть приложение RUMEDIUS и перейти в браузер, набрать в адресной строке адрес <http://portal.dimedus.com>
- Нажать внизу открывшейся страницы кнопку “Активация устройства”

Войти

Email или Playfab аккаунт:

Пароль:



Войти

Активация устройства

- На открывшейся странице активации в поле “Идентификатор” вставьте скопированный идентификатор устройства из буфера обмена

Ключ активации

Идентификатор:

Введите текст в рисунке:



Активировать

7. В поле “Ключ активации” введите активационный ключ, выданный вашим ВУЗом

Ключ активации

Идентификатор:

Введите текст в рисунке:



Активировать

8. Введите текст на рисунке

Ключ активации

Идентификатор:

Введите текст в рисунке:




Активировать

9. Нажмите кнопку “Активировать”. В случае успеха, будет выведено сообщение “Вы успешно активировали Ваше устройство”

 **Активировано** 

Вы успешно активировали Ваше устройство

10. Выгрузите приложение RUMEDIUS из памяти смартфона и запустите заново. В списке должно появиться порядка двухсот сценариев.

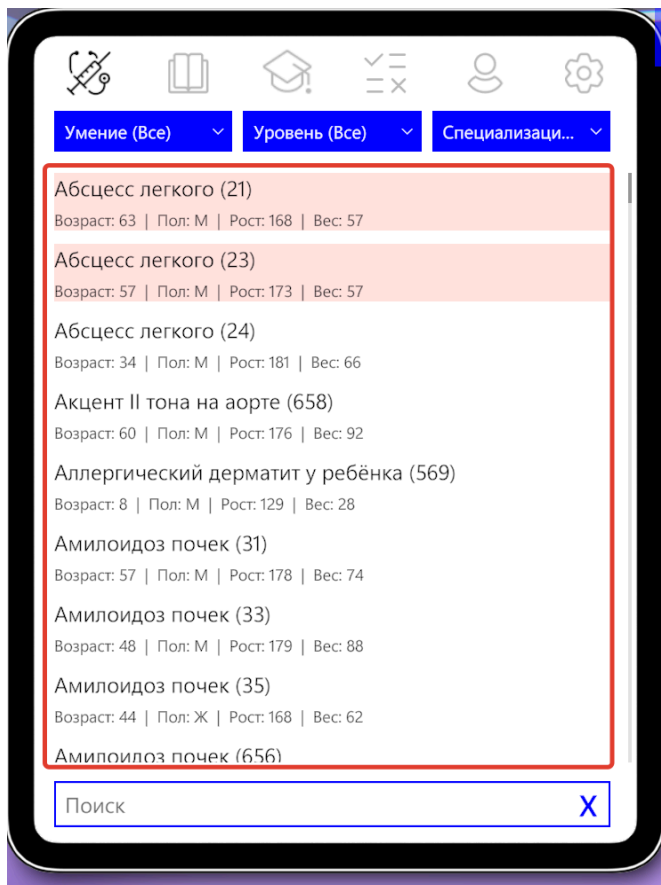

Установка на ПК под управлением Windows

Ссылка на Руководство по установке:

[Руководство по установке на ПК](#)


Установка на смартфон или планшет под управлением Android

Ссылка на Руководство по установке:

[Руководство по установке на Android](#)

Активация лицензионного ключа на устройствах под управлением Android или Windows

В виртуальном планшете в верхней панели необходимо выбрать иконку Личный кабинет, после этого нажать кнопку Активация ключа.

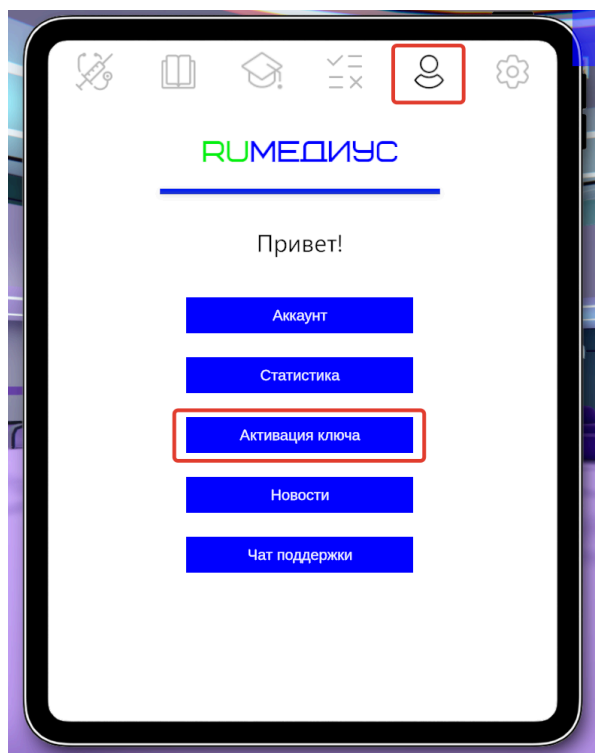

Далее необходимо ввести в соответствующее поле ключ и нажать Применить. После это снизу появится данные идентификатор пользователя на которого ключ активирован, последние символы ключа и срок его действия.

Активация ключа



Ключ


Применить

Идентификатор

fb05af806d78



Если приложение не активировано ключом, то он будет работать в Демо-режиме, то есть будет доступно всего несколько сценариев, названия остальных сценариев в списке будут неактивным и отображены серым цветом.

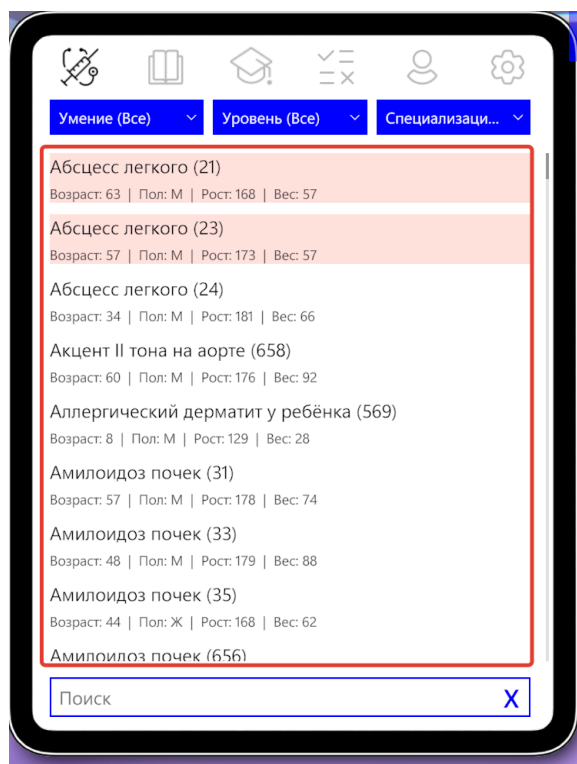


Установка на шлем виртуальной реальности Quest

Ссылка на руководство по установке

[Руководство по установке на Quest](#)

Активация лицензионного ключа на шлеме виртуальной реальности Quest


Запустить на шлеме приложение RUMEDIUS из быстрого меню или Библиотеке приложений.

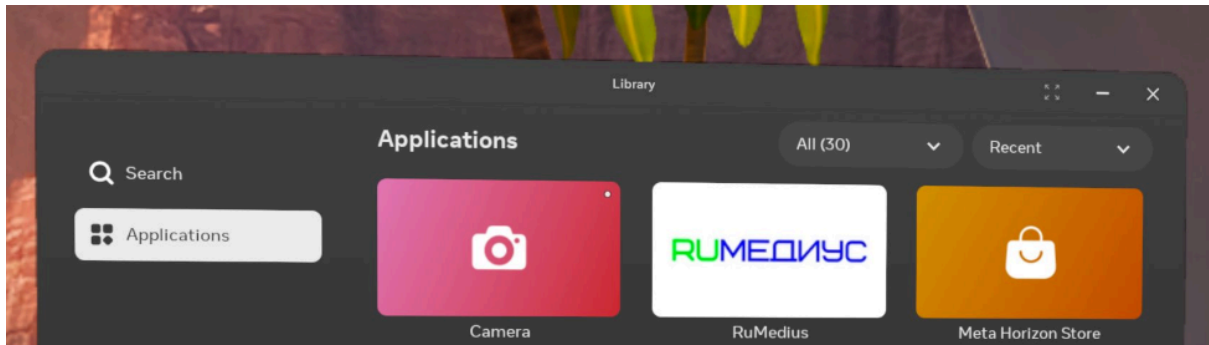


Нажать кнопку Меню на запястье, выбрать в меню три полосы, откроется виртуальный планшет.




В виртуальном планшете перейти во вкладку Настройки, активировать пальцем или курсором меню идентификатор устройства.

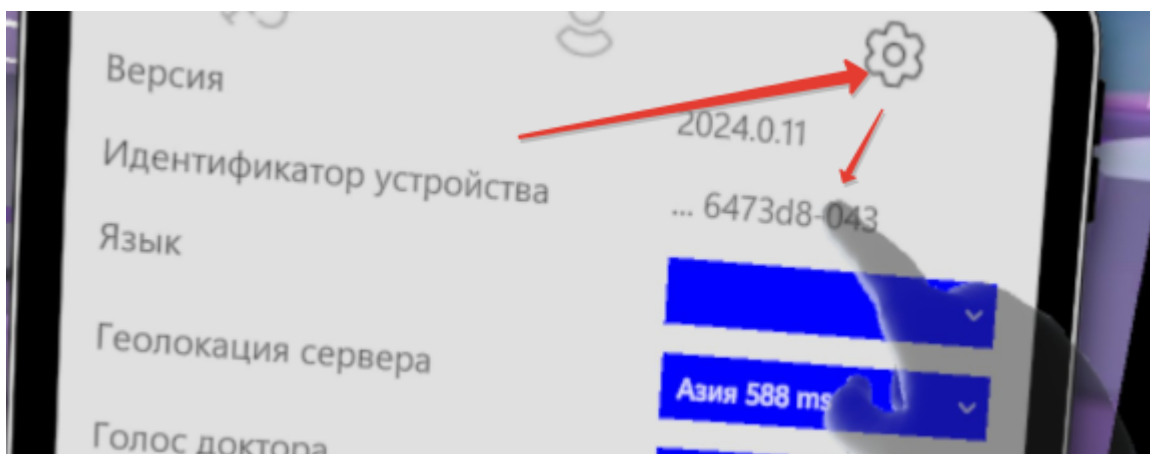


При этом идентификатор будет скопирован в буфер обмена, о чем появиться сообщение.

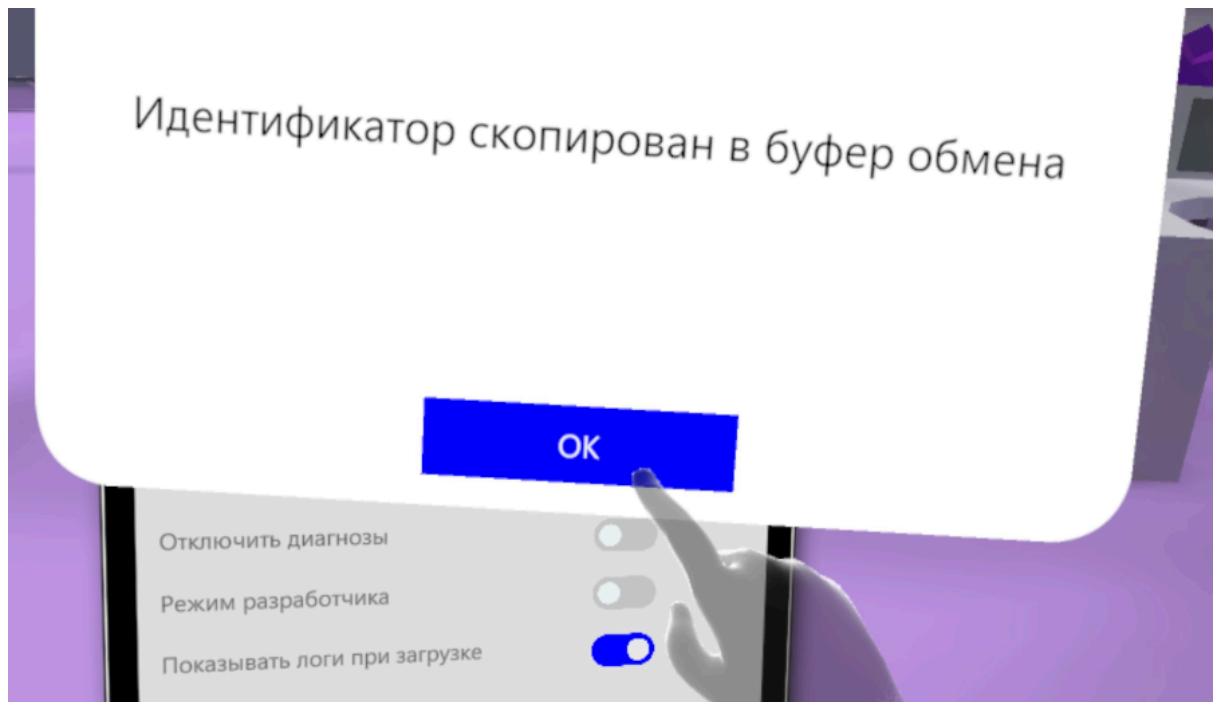

Выйти из приложения

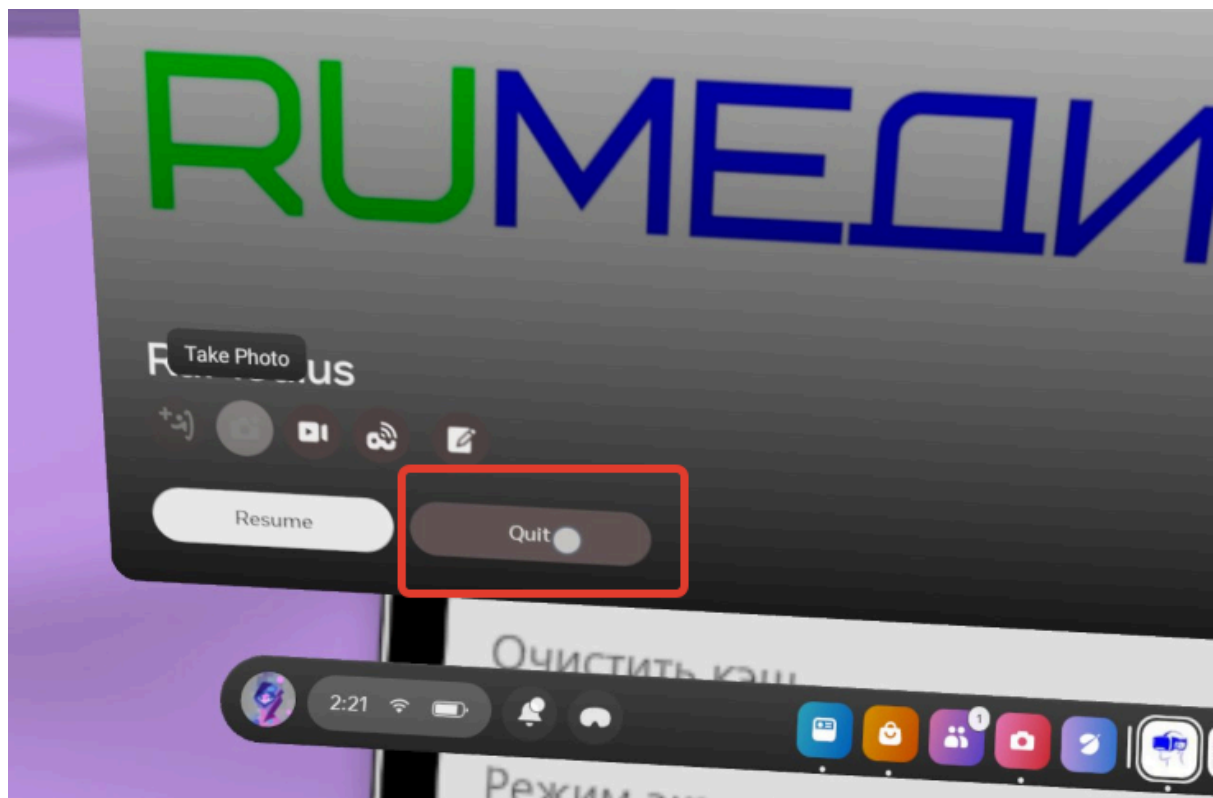

В Библиотеке приложений открыть Browser

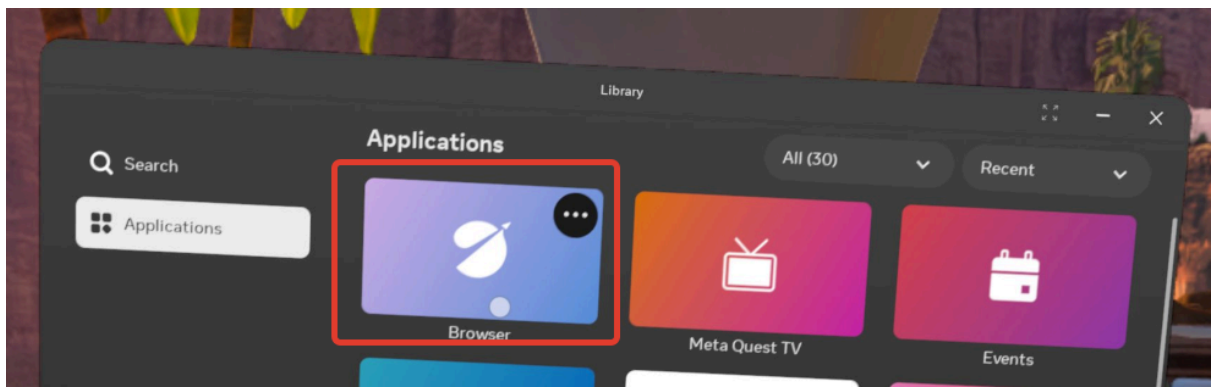

В адресной строке браузера набрать portal.dimedus.com, внизу страницы нажать кнопку Активировать устройство.

В поле Идентификатор вставить скопированный идентификатор, в поле Ключ активации набрать специальный ключ активации для RUMEDIUS на Quest, ввести капчу и нажать Активировать

При успешной активации в правом верхнем углу появится соответствующее сообщение.

